


  **wissner-**
  **bossenhoff**
Functional. Intelligent. Dignified.

sentida sc

Universeel laag verpleegbed



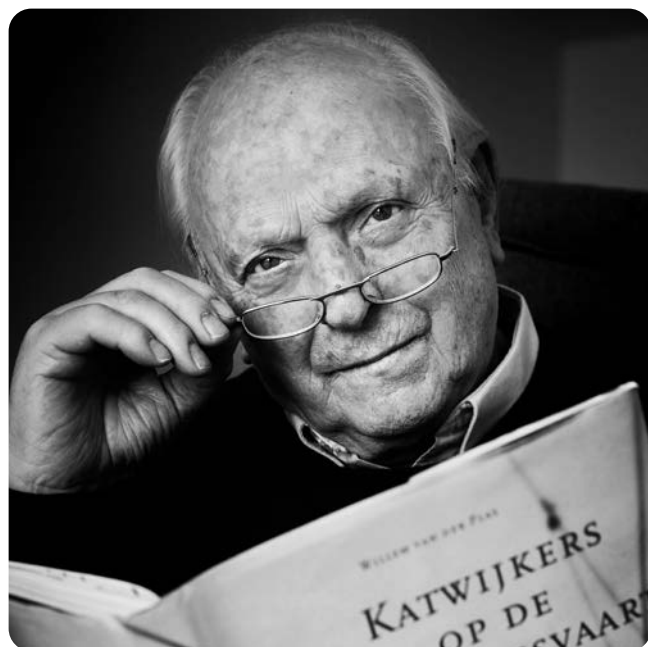

Zo veelzijdig als uw behoeften

sentida sc – universele lage verpleegbedden

Dankzij de medische en technische vooruitgang neemt de levensverwachting al tientallen jaren gestaag toe. De hoge leeftijd die velen nu al bereiken, heeft uiteenlopende gevolgen.

Het is de grote wens van veel ouderen om hun laatste levensjaren in een vertrouwde omgeving te kunnen doorbrengen.

Tegelijkertijd is de perceptie van ouderen in de samenleving als geheel aan het veranderen: Tegenwoordig zien veel senioren pensionering niet meer als stilstand, maar als een levensfase waarin zij diverse interesses nastreven en actief willen leven.

Er is behoefte aan nieuwe concepten voor wonen en leven op oudere leeftijd. Hiertoe behoort de vraag naar meer huiselijkheid, individualiteit, veiligheid, comfort en flexibiliteit bij de inrichting van passende vormen van huisvesting.

wissner-bosserhoff is zich bewust van deze behoeften en veranderingen. Als internationaal actieve onderneming op het gebied van de zorg hebben wij ons hieraan aangepast.

Ouderen hebben verschillende behoeften en eisen met betrekking tot hun leven en leefomgeving.

Met het nieuwe bedplatform sentida sc en de op maat gesneden aanpak kunnen wij nog flexibeler en efficiënter op de verschillende behoeften inspelen. Wij willen het behoud en de stimulering van de individuele mobiliteit als essentieel doel voor de zorg op een oplossingsgerichte manier ondersteunen.

Functional. Intelligent. Dignified.



Aan de zorg worden zeer hoge eisen gesteld: empathisch, sociaal, veelzijdig, intercultureel en vooral professioneel. Binnen de zorg zijn er grote veranderingen gaande en zijn er vele uitdagingen. Technische en digitale ontwikkelingen zullen een beslissende rol spelen bij de vormgeving van de zorg in de toekomst.

Thomas Erbslöh, directeur wissner-bosserhoff GmbH

Functional. Intelligent. Dignified.

De sentida sc premium verpleegbedden van wissner-bosserhoff zijn een consequente en vooral compromisloze omzetting van een allround-benadering voor de verdere ontwikkeling van de hedendaagse behoeften binnen de zorg en bij de ondersteuning in verschillende woonvormen.



10

Individueel mobiliseren

Behoud en stimulans van mobiliteit zijn centrale doelstellingen in de professionele zorg.



16

Veilig slapen

Rusten en slapen met behoeftegerichte functies van een universeel laag verpleegbed.



18

Bed-exit-sensorsysteem

Individuele ondersteuning en veiligheid door een intelligent sensorsysteem – zonder beperkingen.



22

Professioneel digitaliseren

Innovatieve, digitale oplossingen ter ondersteuning van individuele zorgactiviteiten en complexe zorgprocessen.



24

Intelligent netwerk

Duurzaam voorbereid zijn op toekomstige zorgbehoeften.



28

Behoeftegerichte zorg

Optimale en veilige toegang tot de bewoner.

Woonconcepten

Maak kennis met concepten die zijn afgestemd op verschillende woonvormen, behoeften en vereisten.

Altstadt



8

Seaview



14

Cottage



20

Sunset



26

Provence



32

sentida sc portfolio

Model	huiselijk comfort	extra-mobiel	accessible	Zo veelzijdig als uw behoeften.	
				Alle modellen van de sentida sc zijn eenvoudig en moeiteloos te manoeuvreren - vooral de extra-mobiele variant met grotere wielen voor nog meer rijcomfort. Zo kunnen ook zwaar gehandicapte en immobiele bewoners in hun woonomgeving of verpleeginstelling deelnemen aan activiteiten in het dagelijkse leven. De extra mobiele variant heeft een centraal remsysteem dat slechts een voetbeweging nodig heeft om te remmen. Dit is optioneel ook te kiezen voor de huiselijke variant, anders wordt het huiselijke comfort model standaard geleverd met een op de as gemonteerde rem. Het accessible model kan worden vastgezet met een asrem aan de voetzijde. De zwenkwielen aan de hoofdzijde zorgen voor meer flexibiliteit en meer comfort bij het veilig manoeuvreren en plaatsen van het bed.	
Verrijdbaarheid	Bij elke bedhoogte en -stand maximale flexibiliteit door manoeuvreerbaarheid in alle richtingen	Bij elke bedhoogte en -stand maximale flexibiliteit door manoeuvreerbaarheid in alle richtingen	Bij elke bedhoogte en -stand maximale flexibiliteit door manoeuvreerbaarheid in alle richtingen		
Wielen	2 dubbele zwenkwielen van elk 50 mm aan het hoofd- en voeteneinde met zwenkwielafdekking	Zwenkwielen van 100, 125 of 150 mm	4 dubbele zwenkwielen van elk 50 mm aan het hoofd- en voeteneinde met zwenkwielafdekking		
Rem opties	Op de as gemonteerde pedaalrem of optioneel pedaalrem voor centraal remmen	Remstang aan het voeteneinde voor centraal remmen	Pedaalrem aan aszijde, remstang aan voeteneinde op dubbel wiel, hoofdzijde		
					
	As- of centrale rem • Snel en gemakkelijk remmen • Aan beide zijden bedienbaar	Centraal remsysteem • Snel en gemakkelijk rembaar • Goede toegankelijkheid van de remstang in elke hoogtepositie	Asremsysteem aan voetzijde • Snel en gemakkelijk rembaar • Goede toegankelijkheid van de rembeugel in elke hoogtepositie	Wielblokkering aan hoofdzijde • Eenvoudige bediening door halfautomatische vergrendeling • Geïntegreerde richtingsvergrendeling • Stabiel verrijdbaar en veilige positionering van het bed	
Veilige werklast					
Hoogteverstelling	ca. 23 - 80 cm	ca. 23 - 80 cm*	ca. 23 - 80 cm		
Ligvlak	87 / 90 x 200 cm 87 / 90 x 210 cm 100 x 200 / 210 cm (sentida sc-xl)	87 / 90 x 200 cm 87 / 90 x 210 cm 100 x 200 / 210 cm (sentida sc-xl)	87 / 90 x 200 cm 87 / 90 x 210 cm		



Woonconcept Altstadt

Design Dfx | huiselijk comfort
Decor Noorse esdoorn



wissner-bosserhoff | sentida sc



sentida sc | wissner-bosserhoff

sentida sc, huiselijk comfort met centraal remsysteem, op maat gemaakt voor:

- seniorenwoningen
- begeleid wonen
- revalidatieklinieken
- speciale verzorging en verpleging bij ernstige fysieke beperking of immobiliteit



Individueel mobiliseren

Behoud en bevordering van mobiliteit zijn centrale doelstellingen in de professionele zorg

Mensen hechten veel belang aan hun eigen mobiliteit. Mobiliteit is de beslissende factor bij alle activiteiten in het dagelijkse leven, veel andere dingen hangen ervan af.*

Het is niet zonder reden dat het behoud en de bevordering van de individuele mobiliteit, vooral van ouderen, een kerncategorie van de zorg is.

Passende verpleegkundige maatregelen leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van nieuwe beperkingen en stoornissen die van invloed zijn op de

mobiliteit en daardoor kunnen leiden tot een grote afhankelijkheid van hulp en behoefte aan zorg.*

De mensen en hun mogelijkheden staan centraal

Voor de mobilisatie van mensen bestaat geen standaard techniek. Ondersteunende en begeleidende maatregelen moeten dus individueel worden aangepast aan de situatie en de persoon.

Behoud en bevordering van mobiliteit kunnen dus niet los van elkaar worden gezien, maar moeten nauw worden gekoppeld aan ergonomie en ergonomische werkprocessen. Dit geldt zowel voor een veilige mobilisatie “uit bed” als “in bed”.

Het universele lage verpleegbed sentida sc van wissner-bosserhoff is zo ontworpen dat de uitrusting aan verschillende behoeften en specifieke eisen kan worden aangepast.



In mijn bed ben ik veilig, ik kan het gemakkelijk instellen en ik kan comfortabel opstaan - zonder hulp.


Walter Schulte, bewoner



Video afspelen

Oplossing 1

SafeFree® onrustthekken – veilig mobiliseren ongeacht de lichaamslengte

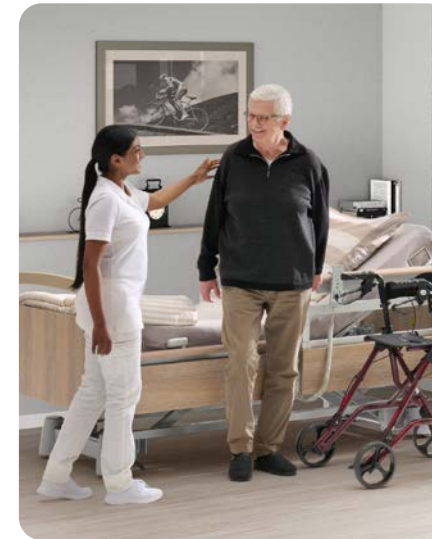

SafeFree®

- door zijn verdeling optimaal voor het uit bed stappen,
- kunnen afzonderlijk in 4 hoogteniveaus worden gepositioneerd,
- goed grijpbaar,
- een veilige opstahulp - alleen of met ondersteuning.

Het extra **VOORDEEL** van sentida sc: Individuele opties dragen bij tot meer duurzaamheid en investeringszekerheid

Oplossing 2

SafeLift en MobiStick 2 – Mobilisatiehulp



SafeLift

- voor de bewoner eenvoudig bedienbaar,
- een sta op- en mobilisatiehulp,
- één bediening voor hoogteverstelling en rugleuning zonder batterij of kabel,
- individueel instelbaar voor elke bewoner.



MobiStick 2

- snel en eenvoudig inzetbaar,
- slim en eenvoudig te bedienen,
- een ondersteuning bij het rechtop zitten op de rand van het bed,
- ergonomisch en biedt extra steun bij het opstaan.



Oplossing 3 SafeControl® handschakelaar – overzichtelijk, ergonomisch en intuïtief

SafeControl® is

- overzichtelijk en ergonomisch ontworpen,
- intuïtief te bedienen en foutbestendig dankzij de voorselectie,
- gemakkelijk af te lezen, zelfs in het donker, dankzij het bewegingssensorsysteem met achtergrondverlichting,
- flexibel en veilig aan te brengen aan het SafeFree® onrusthek-element
- voorzien van speciale verzorgingsfuncties
- beveiligd tegen onjuist gebruik door een geïntegreerde vergrendelingsfunctie.

Het extra **VOORDEEL** van sentida sc:
De SafeControl® handschakelaar kan zonder gereedschap snel en zonder veel moeite naar wens aan de linker of rechterzijde van het bed worden geplaatst.



Video afspelen



Verpleegkundige maatregelen voor het behoud of de bevordering van de mobiliteit dragen bij aan de elementaire basisvoorwaarden voor zelfstandig leven.


Expert-standaard volgens § 113a SGB XI
"Behoud en bevordering van de mobiliteit in de zorg", actualisering 2020

Oplossing 4 Dubbele retractie van het ligvlak – veilig en comfortabel mobiliseren in bed

— Standaard ligvlak zonder belastingvermindering



+ WIBO-ligvlak met duidelijke belastingvermindering

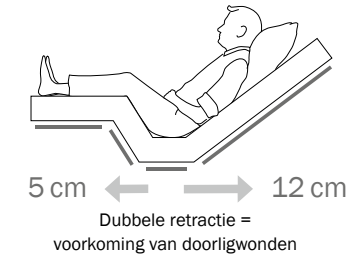

Dubbele retractie = 17 cm meer ruimte in bed!

De dubbel retractie

- optimaliseert het steunoppervlak in het zitgedeelte door het oppervlak van de rugleuning en de bovenbeensteun te vergroten,
- vermindert de druk op gevoelige lichaamsdelen zoals het zitvlak en het stuitbeen,
- vergemakkelijkt de ademhaling omdat er door een ontspannen zithouding meer ruimte ontstaat in de borstkas en de buikstreek,
- biedt in combinatie met de lange rugleuning van bijna 90 cm een preventieve en comfortabele positionering voor immobiele bewoners.

Oplossing 5 Automatische posities – snel, eenvoudig en ergonomisch dankzij de one-touch-filosofie



Probleemloos tv kijken, lezen of ontbijten in bed dankzij de automatische positionering voor comfortabel zitten



Preventie van doorligwonden en vrijleggen van de hielen met behulp van de preventiepositie-automaat

De automatische comfortzit- en preventieposities

- bevorderen het welzijn van met name immobiele bewoners,
- verbeteren de levenskwaliteit van bedlegerige bewoners,
- ondersteunen zorgstrategieën op het gebied van decubitusprofylaxe en wondbehandeling.



Woonconcept Seaview

Design G | huiselijk comfort
Decor Italian Oak



wissner-bosserhoff | sentida sc



sentida sc | wissner-bosserhoff

sentida sc, huiselijk comfort met centraal remsysteem,
op maat gemaakt voor:

- seniorenwoningen
- begeleid wonen
- speciale verzorging en verpleging bij lichte fysieke beperkingen
- dementie-woongroepen



Veilig slapen

De lage positie voor comfortabel rusten en slapen

De meeste mensen willen tot op hoge leeftijd mobiel en onafhankelijk blijven. Door het natuurlijke verouderingsproces neemt de beweeglijkheid van het lichaam echter af of wordt beperkt. Dit verhoogt het valrisico.*

Bewoners van verpleeghuizen hebben een verhoogd valrisico. Vaak gaan valpartijen zelfs gepaard met verwondingen die behandeld moeten worden.

Maar ook bij minder ernstige valpartijen duurt het genezingsproces vaak lang en neemt het zelfvertrouwen af.

Bovendien is er angst om weer te vallen. Dit kan vaak stressvoller zijn dan de val zelf. Angst om te vallen komt vaak voor bij oudere mensen.**

Mensen met valangst beperken hun eigen mobiliteit. Ze worden steeds afhankelijker en hebben meer zorg nodig.***

Valangst komt 's nachts vaker voor.

Duisternis beperkt ook het oriëntatievermogen, het inschatten van afstanden en de loopveiligheid. Om deze cyclus te

doorbreken moet een gerichte en op de behoeften afgestemde aanpak worden gevolgd om het zelfvertrouwen te versterken, valangst te verminderen en het lichaam optimaal te ondersteunen.

Met duurzame en conceptuele inrichtingsmogelijkheden biedt het verpleegbed sentida sc van wissner-bosserhoff oplossingen die rekening houden met verschillende verzorgingsniveaus en individuele mogelijkheden en capaciteiten van oudere bewoners.




Video afspelen

* Recherche und Analyse von Pflegebedürftigkeitsbegriffen und Einschätzungsinstrumenten; copyright © GKV-Spitzenverband 2011 / ISBN: 978-3-7747-2308-5 Sturzprophylaxe in der Pflege - Expertenstandards leicht verständlich; Stand: Januar 2013 Unter Berücksichtigung der 1. aktualisierten Fassung des Expertenstandards 2013 / Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebedürftige Menschen (BIVA) e.V. | ** S. Schlee: Sturz im Alter und seine Folgen - Der Anfang vom Ende? ARS MEDICI DOSSIER XI, 2016 | *** A. Zegelin: «Festgenagelt sein» - Der Prozess des Bettlägerigwerdens durch allmähliche Ortsfixierung; Pflege 2005; 18:281-288 © by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 2005

Oplossing 1

Lage positie 23 cm – veilig slapen zonder beperking van persoonlijke behoeften

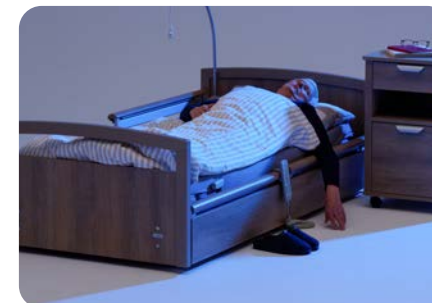

De lage positie van 23 cm biedt

- een huiselijke uitstraling zonder storende componenten,
- een praktische oplossing zonder dat de bewoner zich beperkt voelt,
- de bewoner heeft de mogelijkheid om op eigen kracht toch veilig op te staan.



Oplossing 2

SafeFree® op oriëntatiepositie – angstreductie zonder onnodige barrières



De plaatsing van het onrusthek aan het hoofdeinde kan

- in combinatie met de lage positie van 23 cm extra veiligheid bieden,
- onnodige barrières voorkomen en het valgevaar verminderen.

Het extra **VOORDEEL** van sentida sc:

Lage positie met 23 cm en een gepatenteerd en aanpasbaar onrusthekkenconcept dat onbeperkte afwegingen per geval mogelijk maakt bij de planning van zorgmaatregelen.

Oplossing 3

SafeFree® vast en flexibel – aangepast aan verschillende basiszorgbehoeften



Geen bescherming



3/4 bescherming




Passieve bescherming



Volledige bescherming



De 4 gedeelde bedhekken incl. zijplank in combinatie met een groot aantal configuratiemogelijkheden voor de SafeFree® onrusthekken - als vaste of flexibele variant en als gedeeltelijke of volledige bescherming van het verpleegbed - ondersteunen bewoners met een valrisico en maken het mogelijk om voor ieder individu een passende configuratie te vinden.

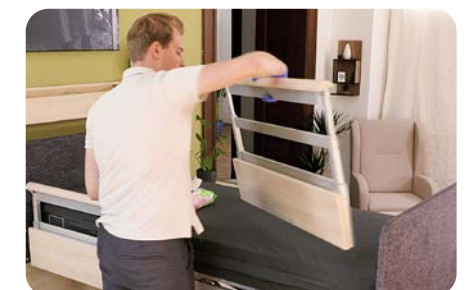



Oplossing 4

SafeSense® – autonoom en veilig verlaten van het bed met individuele oproepmelding

Het bed-exit-assistentiesysteem

- geeft een signaal aan het verplegend personeel dat de bewoner op het punt staat het bed te verlaten,
- werkt met een instelbare timerfunctie (0 - 30 min) volgens het verkeerslichtprincipe,
- kan naar wens worden aangesloten op een automatisch nachtlicht, die bij het verlaten van het bed wordt geactiveerd,
- kan worden aangesloten op het oproepsysteem,
- is tevens draadloos beschikbaar,
- kan worden aangepast.**

Het extra **VOORDEEL** van sentida sc:
De som van de oplossingen maakt het verschil: lage positie met 23 cm en een gepatenteerd en aanpasbaar onrusthekkoncept + intelligent bed-exit-assistentiesysteem.

Bed-exit-assistentiesysteem – Wat houdt het in?

SafeSense® geeft een signaal aan het verplegend personeel dat de bewoner het bed verlaten heeft of op het punt staat het bed te verlaten. Hierdoor kunnen valpartijen eerder worden vastgesteld in plaats van bij routinecontroles.

In principe werkt het bed-exit-assistentiesysteem als een soort verkeerslicht. De werking kan als volgt duidelijk en eenvoudig worden uitgelegd:

-  **Timer niet geactiveerd**
-  **Timer geactiveerd**
→ bijv. 15 minuten voor nachtelijk toiletbezoek
-  **Timer afgelopen**
→ signaal aan het oproepsysteem

SafeSense® – de intelligente bed-exit-sensoren

De bevordering en het behoud van de gezondheid op oudere leeftijd en de versterking van de zelfstandigheid van oudere mensen in combinatie met een verbetering van de levenskwaliteit is de visie van wissner-bosserhoff bij de ontwikkeling van producten voor de verzorging.
Het thema veiligheid, in combinatie met intelligente bed-exit-sensortechnologie voor dag en nacht en nieuwe technische mogelijkheden, speelt hier een essentiële rol.



Meer veiligheid – minder VBM*

- snelle reactietijd bij valincident
- hoger veiligheidsniveau bij nacht- en weekenddiensten
- minder controlerondes
- ideaal in combinatie met sentida sc lage verpleegbedden en SafeFree®-onrusthekken





Woonconcept Cottage

Design Ts | huiselijk comfort
Decor Iep Salisbury



wissner-bosserhoff | sentida sc



sentida sc | wissner-bosserhoff

sentida sc, huiselijk comfort met doorlopende onrusthekken en centraal remsysteem, op maat gemaakt voor:

- dementie-woongroepen
- begeleid wonen
- revalidatieklinieken met bijzondere aandacht voor neurologische aandoeningen
- speciale verzorging en verpleging bij lichte fysieke beperkingen



Professioneel digitaliseren

Innovatieve, digitale oplossingen ter ondersteuning van individuele zorgactiviteiten en complexe zorgprocessen

Deskundigen zien de digitalisering van de ouderenzorg, waarmee door middel van technische innovaties het zorgpersoneel kan worden ontlast, als een grote kans.

Digitalisering ondersteunt de dagelijkse verpleegroutine

Door het gerichte gebruik van sensoren kunnen bijvoorbeeld mogelijke valrisico's en gebrekkige bewegingspatronen bij bewoners in een vroeg stadium worden opgespoord en gemeld. Het gebruik van mobiele apparatuur maakt ook mobiel en vlot werken met tijdswinst mogelijk.

Specialistische kennis en informatie over zorgonderwerpen kunnen sneller en vanaf elke locatie worden geraadpleegd. Onderlinge sociale relaties, maar ook relaties met familieleden, kunnen zonder veel moeite worden onderhouden.

Werkprocessen kunnen nog efficiënter worden gemaakt als zorginstellingen de gegevens van hun digitale documentatie systematisch evalueren en samenvoegen. Uit deze resultaten kunnen correlaties worden afgeleid tussen de uitgevoerde behandelingen en de eisen voor een betere zorgplanning.

wissner-bosserhoff richt zich momenteel op drie onderwerpen en de daarmee verbonden risico's voor de bewoners: vallen, decubitus en incontinentie.

De digitale zorgassistent SafeSense® 3 kan helpen om de gegevens te analyseren en zo nodig preventieve maatregelen te nemen.

De zorg heeft digitalisering nodig - functional, Intelligent and dignified.



Vechtetal Pflege GmbH heeft zich tot doel gesteld de klassieke ouderenzorg met behulp van innovatieve technologie opnieuw uit te vinden. We hebben voor SafeSense® 3 gekozen omdat de veiligheid van onze bewoners onze hoogste prioriteit heeft. Door sneller te reageren op valincidenten kunnen ernstige gevolgen van vallen vaak worden voorkomen.

Eike Jonker, directeur Vechtetal Pflege GmbH

Oplossing 1

SafeSense® 3 – van bed exit-assistentiesysteem tot digitaal platform

Na meer dan 6 jaar ervaring met het geïntegreerde bed-exit-sensorsysteem is de tijd rijp voor een echte digitale zorgassistent. Met het bed-exit-sensorsysteem SafeSense® en het intelligente verpleeg/bed sentida 7-i heeft wissner-bosserhoff al sinds 2014 uitgebreide ervaring met smart care.

In deze periode is SafeSense® uitgegroeid tot een zorgassistent met nog meer ondersteunende functies en wordt dankzij de open architectuur aanbevolen als een toekomstbestendig digitaliseringsplatform. Het kan eenvoudig achteraf worden uitgerust met extra functies, die het verplegend personeel extra ontlasten.



SafeSense® 3
PDF-download



- Bewegings-monitoring
- Bed-exit-monitoring
- Zorgmonitor & app
- Vochtigheids-sensor

Intelligent netwerk

SafeSense® 3



1

Mobiele terminals*

Altijd alle gegevens in één oogopslag



2

Software Zorgmonitor

met gegevensvisualisatie

Decubituspreventie door bewegingsmonitoring

Valpreventie door bed-exit-monitoring

Veiligheid
Beveiliging van de bewonersgegevens door versleutelde gegevensoverdracht en decentrale gegevensverwerking



3

Oproepsysteem-aansluiting*

Meer veiligheid tijdens nacht- en weekenddiensten



4

Gepatenteerd bedsensorsysteem

Assistentie voor de zorgverlener



Het verpleegbed van de toekomst is meer dan alleen maar een bed - het biedt effectieve zorg met behulp van intelligente oplossingen en een hogere levenskwaliteit voor de bewoner.

Uwe Deckert | wissner-bosserhoff GmbH



Woonconcept Sunset

Design C | extra-mobiel
Decor Nordic Teak



wissner-bosserhoff | sentida sc



sentida sc | wissner-bosserhoff

sentida sc, extra-mobiel, op maat gemaakt voor:

- hospices
- palliatieve afdelingen
- woongroepen met speciale verzorging/verpleging (bv. comapatiënten)
- speciale verzorging en verpleging met een hoge immobiliteitsgraad



Behoeftegerichte zorg

Optimale en veilige toegang tot de bewoner

Mobilisatiemaatregelen en de dagelijkse zorg voor de bewoners kunnen zeer inspannend en belastend zijn voor het verplegend personeel. Het kan gebeuren dat een zorgverlener in één dienst in totaal tot 1,8 ton* moet tillen. Lichamelijke stress en spanning bij verzorgers kan ook een nadelig effect hebben op de bewoners.

De daaruit voortvloeiende angstreacties van de bewoner kunnen zijn zelfmotivatie en mobiliteit aanzienlijk beperken, zodat beide partijen in hun nauwe interactie in gevaar kunnen worden gebracht.

sentida sc kan zowel verplegend personeel als bewoners ondersteunen.



Oplossing 1

4-traps-strategie – op de situatie en behoeften afgestemde zorg, verpleging en ondersteuning

Het comfortabele verstelbereik van 23 tot 80 cm

- maakt een ergonomische en rugvriendelijke werk-/verzorgingspositie op 80 cm mogelijk,
- biedt in combinatie met de afzonderlijk instelbare boven- en onderbeensteun extra bewegingsvrijheid, bijv. bij de basisverzorging of de wondverzorging,
- maakt een efficiënte “bed/stoel”-transfer en omgekeerd mogelijk met de mobilisatiehoogte op stoelhoogte van 41 cm,
- een veiligheidsstop op een hoogte van 31 cm, die bescherming biedt tegen beknelling van de voeten en tegelijkertijd een goede mobilisatiehoogte is voor kleinere bewoners.
- biedt een veilige slaappositie op 23 cm hoogte.

80 cm

Optimale verpleegpositie



41 cm

Veilige mobilisatie op stoelhoogte



31 cm

Veiligheidsstop / Veilige mobilisatie voor kleine bewoners



23 cm

Valpreventie tijdens het slapen



Oplossing 2

Centrale rem – asrem aan het voeteneinde van het huiselijke verpleegbed



Optioneel heeft de sentida sc een centrale rem aan het voeteneind, die gemakkelijk en veilig te bereiken is. Door de centrale rem te ontgrendelen kan het bed snel en gemakkelijk worden verplaatst, bijv. voor reiniging




Oplossing 3 **Comfortligvlak –**
meer veiligheid voor immobiele bewoners



Het comfortligvlak is uitgerust met 55 veerelementen die zorgen voor een hoog ligcomfort en extra drukontlasting, om gevolgschade, bijv. door mobiliteitsbeperkingen, te voorkomen.

Het extra **VOORDEEL** van sentida sc:
In combinatie met de dubbele retractie en de automatische comfortzitpositie kan het comfort-ligvlak preventieve verzorgingsmaatregelen ondersteunen en bovendien de levenskwaliteit verhogen.

Oplossing 4 **Geïntegreerde bedverlenging –**
flexibel instelbaar zonder gereedschap

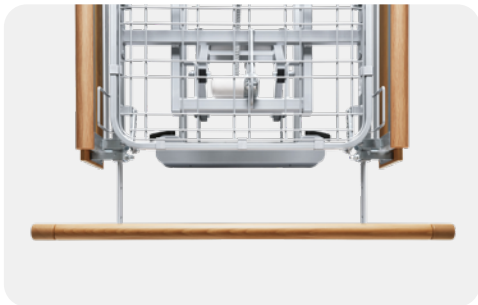

210 cm
Alternatieve bedlengte 210 cm: Bescherming met aan het voeteneinde langere onrusthekken zonder accessoires en zonder opening > 318 mm*

210 of 220 cm
Bedverlenging tot 220 cm: ook bij sentida met gedeelde onrusthekken tijdelijk instelbaar – volledige bescherming wordt gegarandeerd door een protector (accessoire) aan het voeteneinde.

De sentida sc heeft standaard een geïntegreerde bedverlenging, die in elke configuratie voldoet aan de eisen van IEC 60601-2-52.

Oplossing 5 **Wandafstandhouder –**
bescherm het bed tegen beschadiging



Hoofdzijde en zijwand afstandhouders verkrijgbaar, die het bed beschermen tegen beschadiging tijdens manoeuvreren.



Woonconcept Provence

Design G | accessible
Decor Lindberg Eiken



wissner-bosserhoff | sentida sc



sentida sc | wissner-bosserhoff

sentida sc accessible met doorlopende onrusthekken,
op maat gemaakt voor:

- intramurale ouderenzorg
- gedeeltelijke stationaire zorg
- begeleid wonen voor ouderen
- verzorging en verpleging met lichte lichamelijke beperkingen
- kortdurende en preventieve zorg

Design

Design | Hoofd-/voeteneinde



Design A
Hoofd-/voeteneinde



Design Ak
Voeteneinde inklapbaar



Design C
Hoofdeinde



Design C
Voeteneinde



Design Cx
Voeteneinde vlak



Design Df
Hoofd-/voeteneinde



Design Dfx
Voeteneinde vlak



Design G
Hoofdeinde



Design G
Voeteneinde



Design Gx
Voeteneinde vlak



Design O
Hoofd-/voeteneinde



Design Ts
Hoofdeinde



Design Ts
Voeteneinde



Design Tsx
Voeteneinde vlak


Doorlopende onrusthekken (optie)



Optioneel ook met doorlopende onrusthekken en 4 SafeFree® onrusthekken.

3 ligvlakken

Modulariteit ook in de keuze van het ligvlak

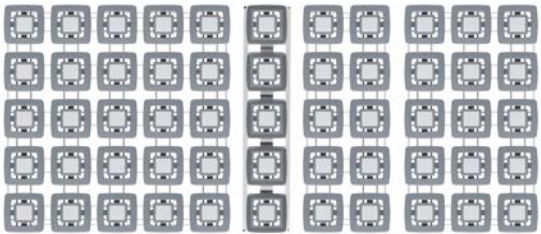

Comfort

- 55 veerelementen
- Ligvlakframe in wit aluminium


Hoog ligcomfort & eenvoudige drukontlasting



EasyClean

- ABS kunststof kussens
- Ligvlakframe

Gemakkelijk te reinigen

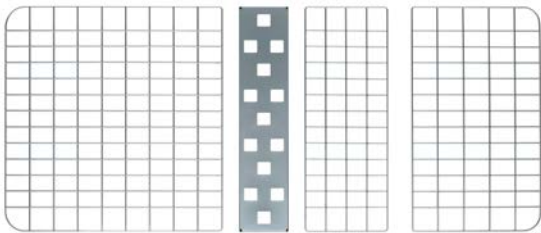

Aero

- Draadgaassteunen
- Ligvlakframe van wit aluminium

Goede ventilatie



Kleuren & Design

Kleuren | Decors*



Kunstleer | Softcover voor hoofd-/voeteneinde Df* of hoteldesign



Stof | Softcover voor hoofd-/voeteneinde Df* of hoteldesign



Softcover of hoteldesign

Alle getoonde stof- en kunstleerdecors zijn covers die u zelf eenvoudig en zonder gereedschap op het hoofd- en voeteneinde* van uw verpleegbed kunt aanbrengen. De softcovers zijn uiterst slijtvast, vocht-, vuil- en waterafstotend en ademend.



Design: Df
Stof: Zand
Decor: Puntige esdoorn



Design: C
Hoofddecor: Noorse esdoorn
Accent: Elm Salisbury Natuur

Tweekleurig beddesign

Alle houtdecors kunnen worden gecombineerd tot tweekleurig bed design:

Hoofddecor

Hoofdbord, voeteneind & zijpaneel

Accentdecor

Leuning Zijhekken, klampen en randen aan hoofd- en voeteneind

De kleuren kunnen afwijken van de afbeeldingen, wij raden aan een originele sample te raadplegen voor de definitieve kleurkeuze.



Kunstleer: Smoke
Decor: Nordic Teak



Stof: Zand
Decor: Noorse Esdoorn



Technische gegevens

Volgens bijlage VIII, #13 van de (Duitse) Verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR) 2017/745, is het verpleegbed sentida sc een medisch hulpmiddel van klasse I.

Buitenafmetingen, min./max. ¹⁾	205 x 103 / 208 x 104 cm
Ligvlak	90 x 200 cm
Matrasmaat	87 – 90 x 200 cm
Hoogteverstelling ²⁾	23 – 80 cm
Toegankelijkheid	15 cm
Lengte rugleuning	88 cm
Rugleuningverstelling	70° ± 5° incl. terugtrekking van de rugleuning met ca. 11 cm
Rugleuning terugtrekking	11 cm
Lengte zitgedeelte	21 cm
Dijbeengedeelte retractie	6 cm
Lengte bovenbeen	36 cm
Dijbeensteunverstelling	30° ± 5° incl. terugtrekking van de dijbeensteun met ca. 6 cm
Dubbele retractie	17 cm meer ruimte in het bed
Onderbeengedeelteverstelling	32°
Onderbeenlengte	55 cm
(Anti-)Trendelenburg, draaibaar	hoofd ca. 17° /voet ca. 17°
Veilige werklast ³⁾	270 kg
Max. Inzittendengewicht	235 kg
Bedgewicht ⁴⁾	ca. 115 kg
Vorbereiding SafeSense® 1+3	inbegrepen
Beschermingsklasse	IPX4
Beschermingsklasse	II

1) Afhankelijk van het gekozen hoofd-/voetgedeelte | 2) Voor 50 mm dubbele wielen en 100 mm wielen met extramobil model | 3) **Aanbeveling van de fabrikant:** het maximum Afhankelijk van het gewicht van de gebruikte matras en accessoires kan het maximale gebruikersgewicht worden verhoogd. Voorbeeld: veilige werklast 270 kg - matras 10 kg - accessoires 10 kg = max. bewonersgewicht 235 kg. Bij gebruik van zware matrassen/toebehoren verandert het bewonersgewicht dienovereenkomstig! | 4) afhankelijk van de uitrusting

Veiligheid

wissner-bosserhoff GmbH is gecertificeerd volgens de bepalingen van ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen, van DIN EN ISO 13485 voor de vervaardiging van medische producten en van ISO 14001 voor milieumanagement. Bovendien laat wissner-bosserhoff zijn productieprocessen en management regelmatig door TÜV Süd controleren.



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



ISO 14001:2015



CB-certificaat voor productveiligheid, TÜV Süd



Attest inzake onrusthekken



ISO 9001
Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
www.tuev-sued.de/ms-zert



ISO 14001
Zertifiziertes Umweltmanagementsystem
www.tuev-sued.de/ms-zert



TÜV SÜD
EN ISO 13485
tuv-sud.com/ps-cert





CLIMATE NEUTRAL
COMPANY
certified by Fokus Zukunft
climate neutral via offsetting


Wij hebben de broeikasgasemissies ten gevolge van de activiteiten van onze onderneming laten registreren** en compenseren deze door de aankoop van klimaatbeschermingscertificaten voor de jaren 2022 en 2023.

Nachtkastjes en andere accessoires

vindt u in de overige folders of op www.wi-bo.eu (NL) & www.wi-bo.be (BE)





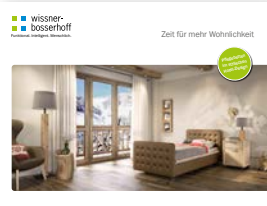







wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Keerweer 42 | 3316 KA Dordrecht

Tel. +31 78 6521850 | sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl

wissner-bosserhoff Belgium B.V.

Research Park Haasrode | Evenementenlaan, 8 | 3001 Heverlee

Tel. +32 16 89 81 91 | info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

Members of LINET Group

