

INSTRUCTIONS FOR USE

EN

Name

BAPSCARCARE S silicone sheets.

Product description

BAPSCARCARE S is a proven technology for treating scars (hypertrophic and keloid) and preventing abnormal scar development after surgery or injury. The medical silicone sheets are self-adhesive, thick, washable, transparent and can be used for long periods.

Composition

- Polyurethane film
- Medical-grade silicones

Characteristics

- BAPSCARCARE S silicone sheets ensure that scars become flatter, more flexible and thinner and that complaints (persistent redness, 'pulling' sensations, itching, restriction of joint movement, discomfort and cosmetic concerns) are reduced.
- The silicone sheet creates a semi-occlusive (covering) layer on top of the skin which results in increased hydration of the skin (epidermis). The increased hydration ensures that damaged, scarred skin recovers more quickly and functional problems (complaints) are reduced.

Indications/applications

BAPSCARCARE S silicone sheets are suitable for:

- both old and new scars
- all skin types
- all ages
- the treatment and prevention of abnormal scars (hypertrophic and keloid)
- the treatment of burn scars
- the treatment of surgical scars
- use under clothing and in compression therapy
- the treatment of persistent functional problems caused by the scar (persistent redness, 'pulling' sensations, itching, restriction of joint movement, discomfort and cosmetic concerns)

Instructions for use

- For an optimal result, it is best to start using BAPSCARCARE S silicone therapy immediately after wound closure (after the sutures have been removed and any scabs have disappeared).

- It is recommended to build up BAPSCARCARE S silicone therapy to a maximum of 23 hours a day. The purpose of this build-up is to allow the skin to gradually get used to the silicone.

- For the best possible result the silicone sheets should be worn for a minimum of 12 to a maximum of 23 hours a day.

- If necessary, the BAPSCARCARE S silicone sheet can be cut to size.

- Make sure that the silicone sheet covers the scar and a 2cm-wide area around it.

- To ensure good adhesion and durability of the silicone sheet, it is advisable to remove any hair around the scar location.

- Thoroughly clean and dry the skin before applying the silicone sheet on and around the scar.

- Remove the first part of the protective film of the silicone sheet and carefully apply the self-adhesive silicone sheet, starting at the edge of the scar.

- Remove the second part of the protective film and apply the next section of the silicone sheet to the scar. Depending on the size of the silicone sheet, the above must be repeated until the entire silicone sheet is applied.

- If necessary, the silicone sheet can be fixed in place with an adhesive or elastic bandage.



- The skin may be treated with a hydrating cream after removing the silicone sheet.

Care instructions

- It is necessary to clean the BAPSCARCARE S silicone sheets thoroughly, on a daily basis. This is

Date of last revision of the instructions for use

January 2021

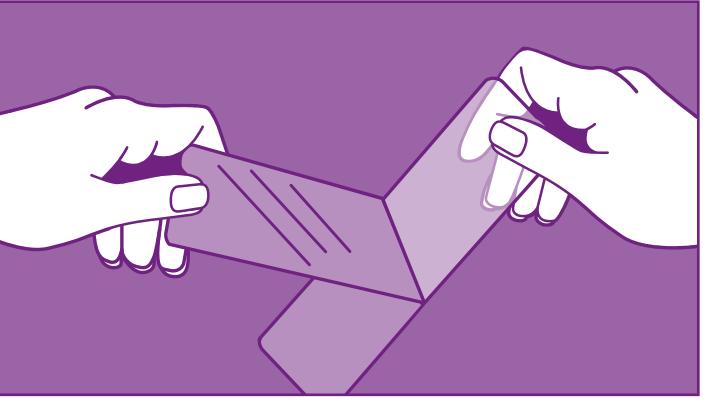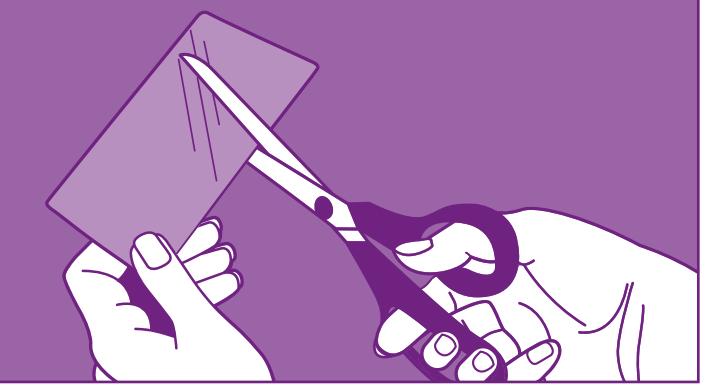

FR

Dénomination

BAPSCARCARE S pansement siliconé.

Description du produit

BAPSCARCARE S est issu d'une technologie prouvée dans le traitement des cicatrices (hypertrophiques et chéloïdées) et dans la prévention du développement de cicatrices atypiques après chirurgie ou un accident. Le pansement siliconé est autocollant, épais, lavable, transparent et peut être utilisé pour une longue période.

Composition

- Film de polyuréthane
- Silicones de qualité médicale

Propriétés

- Les pansages siliconés BAPSCARCARE S aplatisent, assouplissent et affinent les cicatrices et réduisent les symptômes (rougeurs persistantes, tiraillements de la cicatrice, démagéances, limitations articulaires, gênes préjudices esthétiques). Les pansages siliconés peuvent assurer une couche de protection (couvrant complètement la peau) et ainsi une meilleure hydratation de la peau (épiderme). L'hydratation accrue accélère la guérison de la peau cicatricielle abimée et réduit les symptômes fonctionnels (douleurs, etc.).

Indications/champs d'application

Les pansages siliconés BAPSCARCARE S sont indiqués pour :

- les cicatrices anciennes ou récentes
- toutes les peaux
- tous les âges
- le traitement et la prévention des cicatrices atypiques (hypertrophiques et chéloïdées).
- le traitement des cicatrices de brûlures
- le traitement des cicatrices chirurgicales
- une utilisation sous les vêtements et thérapie de compression

- le traitement des gênes fonctionnelles durables dues aux cicatrices (rougeurs persistantes, tiraillement de la cicatrice, démagéances, limitations articulaires, gênes et préjudices esthétiques).

Mode d'emploi

- Pour obtenir un résultat optimal avec le traitement siliconé BAPSCARCARE S, commencer de préférence immédiatement après la fermeture de la plaie (après ablation des sutures et éventuelles croûtes).

- Il est recommandé d'augmenter progressivement la thérapie siliconée BAPSCARCARE S jusqu'à un maximum de 23 heures par jour. Cette augmentation progressive permet à la peau de s'habituer aux silences.

- Pour obtenir le meilleur résultat possible, il est préférable de porter les pansages siliconés 12 heures au minimum et 23 heures au maximum par jour.

- Si nécessaire, le pansement siliconé BAPSCARCARE S peut être découpé aux bonnes dimensions.

- Assurez-vous que le pansement siliconé dépasse de 2 cm tout autour de la cicatrice.

- Pour une bonne adhérence et durabilité du pansement siliconé, il est conseillé d'enlever les poils autour de la cicatrice.

- Nettoyer et sécher soigneusement la peau avant d'appliquer le pansement siliconé sur et autour de la cicatrice.

- Enlever la première partie du film protecteur du pansement siliconé et placer avec précaution le pansement siliconé autocollant sur la base de la cicatrice. Enlever le deuxième partie du film protecteur et appliquer le reste du pansement siliconé sur la cicatrice en fonction de la taille du dispositif siliconé, l'opération ci-dessus devra être répétée jusqu'à une totale application du pansement siliconé.

- Si nécessaire, le pansement siliconé peut être fixé grâce à l'aide d'un bandage cohésif ou extensible.

- Après avoir retiré le pansement siliconé, la peau peut être traitée avec une crème hydratante.

Entretien

- Il est indispensable de bien nettoyer les pansages siliconés BAPSCARCARE S (tous les jours).

ES

Nombre

Aposito de silicona BAPSCARCARE S.

Descripción del producto

BAPSCARCARE S es una tecnología probada para el tratamiento de cicatrices (hipertroficas y queloides) y para prevenir el desarrollo de cicatrices anormales, postquirúrgicas o traumáticas. El aposito de silicona (dado médico) es autoadhesivo, grueso, lavable, transparente y apto para un uso prolongado.

Composición

- Lámina de poliuretano

- Siliconas de grado médico

Propiedades

- Los apositos de silicona BAPSCARCARE S hacen que las cicatrices se vuelvan más planas, más suaves y más delgadas; ayudan a reducir las molestias (rojez persistente, tirantez de la cicatriz, picor, movilidad restringida en articulaciones, incomodidad y molestias cosméticas).

- La aplicación de silicona crea una capa semiocclusiva (cobertura) sobre la piel, que tiene como resultado una mayor hidratación de la piel (epidermis). La hidratación acelera la recuperación del tejido dañado de la cicatriz y ayuda a reducir las molestias.

Indicaciones/ámbitos de aplicación

Los apositos de silicona BAPSCARCARE S son indicados para :

- cicatrices antiguas o recientes
- todas las edades
- el tratamiento y la prevención de cicatrices atípicas (hipertroficas y chéloides).
- el tratamiento de cicatrices de quemaduras
- el tratamiento de cicatrices chirúrgicas
- una utilización sous los vêtements y terapia de compresión

- el tratamiento de gênes funcionales durables dues aux cicatrices (rougeurs persistantes, tiraillement de la cicatrice, démagéances, limitations articulaires, gênes et préjudices esthétiques).

Combien de temps dois-je utiliser le pansement siliconé BAPSCARCARE S ?

- La normalización d'une cicatrice dure au minimum trois à six mois. Il est recommandé de faire un pansement siliconé BAPSCARCARE S tant que la cicatrice est boursouflée, rouge ou que les symptômes persistent.

- La durée du traitement sera fixée en concertation avec le thérapeute/médecin.

Indications/ámbitos de aplicación

Los apositos de silicona BAPSCARCARE S son indicados para :

- cicatrices antiguas o recientes
- todas las edades
- el tratamiento y la prevención de cicatrices atípicas (hipertroficas y chéloides).
- el tratamiento de cicatrices de quemaduras
- el tratamiento de cicatrices chirúrgicas
- una utilización sous los vêtements y terapia de compresión

- el tratamiento de gênes funcionales durables dues aux cicatrices (rougeurs persistantes, tiraillement de la cicatrice, démagéances, limitations articulaires, gênes y préjudices esthétiques).

Duración de uso

Cada envase de BAPSCARCARE S contiene uno o más apositos de silicona.

- Contiene cicatrices antiguas como nuevas

- En el caso de un uso y mantenimiento correctos (según las instrucciones de uso), cada envase ofrece un contenido suficiente para un tratamiento de 4 a 8 semanas.

- Por esta razón, en caso de un tratamiento prolongado, es posible que se requieran varios envases.

Atención y precauciones especiales

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Los apositos de silicona BAPSCARCARE S solo son apropiados para uso externo.

- Utilizar los apositos de silicona BAPSCARCARE S solo en la piel cerrada (después de desaparecer la costra) y nunca en heridas abiertas.

- No secar ni el aposito de silicona BAPSCARCARE S al sol o cerca de una fuente de calor.

- Retirar temporalmente el aposito de silicona BAPSCARCARE S al hacer deporte o nadar. El aposito de silicona BAPSCARCARE S puede desprendese a causa de la transpiración o el contacto con agua.

- No utilizar en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

- No utilizar cuando el envase esté dañado al recibir el producto.

Efectos secundarios

- En casos excepcionales, un tratamiento con silicona puede causar una respuesta de hipersensibilidad a la piel (irritación de la piel). Suspender en dicho caso el tratamiento hasta que la piel haya vuelto a su normalidad.

- Vuelva a comenzar el tratamiento y permita que la piel pueda acostumbrarse más despacio al aposito de silicona BAPSCARCARE S (cada una hora más).

- Si los problemas de piel persisten, consulte a un especialista/médico.

- Si se producen incidentes graves en relación con el producto, estos deben notificarse al fabricante y a las autoridades competentes (del Estado miembro) o lugar donde esté establecido el usuario.

Conservación

- La fecha de caducidad se indica en el envase.

- El aposito de silicona BAPSCARCARE S puede guardarse durante 5 años en las bolsitas sin abrir.

- Guardar a temperatura ambiente o a una temperatura inferior a 25 °C.

Mantenimiento

- Es imprescindible limpiar bien (a diario) el aposito de silicona BAPSCARCARE S. Esto es importante

- para mantener un buen poder adhesivo.

- Frote algunas gotas de un jabón / loción neutras en el aposito de silicona.

- Elimine lo posible la suciedad con jabón y agua templada.

- Aclare a fondo el aposito de silicona con agua corriente templada.

- Després de tempar en contacto con agua y jabón, drenar el exceso de agua.

- Deje secar el aposito de silicona en una superficie seca y limpia, con el lado adhesivo mirando hacia arriba.

- Al secarse, el aposito recupera gradualmente el poder adhesivo.

- Utilice el aposito de silicona solo si está completamente seco.

- Si debido al desgaste se deteriora el poder adhesivo, pueden cortarse las bordes de los apositos de silicona.

- Para que mantenga un buen poder adhesivo.

- Frote algunas gotas de un jabón / loción.

- Elimine la suciedad con jabón y agua tibia.

- Aclare a fondo el aposito de silicona con agua templada.

- Després de tempar en contacto con agua y jabón, drenar el exceso de agua.

- Deje secar el aposito de silicona en una superficie seca y limpia, con el lado adhesivo mirando hacia arriba.

- Al secarse, el aposito recupera gradualmente el poder adhesivo.

- Utilice el aposito de silicona solo si está completamente seco.

- Si debido al desgaste se deteriora el poder adhesivo, pueden cortarse las bordes de los apositos de silicona.

- Para que mantenga un buen poder adhesivo.

- Frote algunas gotas de un jabón / loción.

- Elimine la suciedad con jabón y agua tibia.

- Aclare a fondo el aposito de silicona con agua templada.

- Després de tempar en contacto con agua y jabón, drenar el exceso de agua.

- Deje secar el aposito de silicona en una superficie seca y limpia, con el lado adhesivo mirando hacia arriba.

- Al secarse, el aposito recupera gradualmente el poder adhesivo.

