

Beoogd doekind
Het stomazonde is bedoeld om passief ontlastingsrings uit een stoma op te weeghen. De stomazonde is eenmalig te gebruiken. Het is bedoeld om te helpen aan de risico's van het ontstaan van de stoma.

Indicatie
Het stomazonde is bedoeld voor mensen met een stoma.

Waarschuwingen
Het gebruik van een product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel risico voor de gebruiker in.

Recepten, wassen, ontvetten en/of afnemen kunnen de producteigenschappen aantasten. Het gebruik van het product kan het risico op infectie, huid of andere problemen.

Informatie
Het stomazonde is eenmalig te gebruiken.

De gebruiksaanwijzing van het stomazonde is te vinden op de website van de fabrikant. Het stomazonde is eenmalig te gebruiken. Het is bedoeld om te helpen aan de risico's van het ontstaan van de stoma.

De gebruiksaanwijzing van het stomazonde is te vinden op de website van de fabrikant. Het stomazonde is eenmalig te gebruiken. Het is bedoeld om te helpen aan de risico's van het ontstaan van de stoma.

De gebruiksaanwijzing van het stomazonde is te vinden op de website van de fabrikant. Het stomazonde is eenmalig te gebruiken. Het is bedoeld om te helpen aan de risico's van het ontstaan van de stoma.

Bijzondere bewaarcondities
Het product horizontaal bewaren.


Merken van incidenten
Bismen tegen zonlicht.

Letten op incidenten
Het gebruik van het stomazonde of de gebruiksaanwijzing van het stomazonde kan het risico op infectie, huid of andere problemen.

Hoe te gebruiken




1

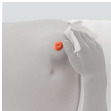


2



3

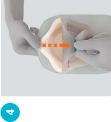

4

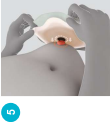

5

Voor het aanbrengen van de huidplak, klap alle 5 schubben om.



6



7



8

Druk de huidplak vanuit het midden naar buiten stomp op de huid.

Gebruik uw wijsvinger om de zachte stabilisatie te vinden die uw stoma omringt. Oefen voorzichtig druk uit op de huidplak tussen de ring en uw stoma (of rechtsreeks op de stabilisatie) om te zorgen dat het middelgebied van de huidplak goed contact op de huid.

Oefen druk uit vanuit het middelgebied van de huidplak en tussen de huidplak en de huid rond de stoma te beschermen.

Filtersticker




Indien u het tijdijk ontstappen van gas uit het zakje wilt voorkomen, plaats dan een van de biologische filterstickers over het filter om het te sluiten. Het voor langere periodes sluiten van het filter: zal het zakje opblazen; dus dit mag alleen voor een korte periode gebeuren.

Instructies voor gebruik nu beschikbaar op video



Om de instructies te zien kunt u de QR-code scannen of gaat u naar <http://coloplast.nl/coverflp/video/gastson>

Producteigenschaften

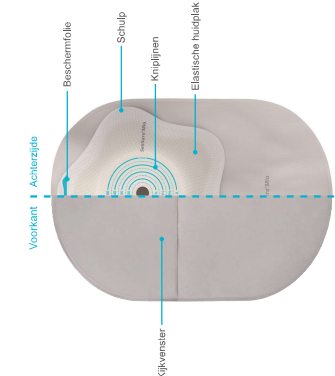

Verwijderen



Verwijder het ziele voorzichtig door het verwijderingslatje aan de huidplak weg van de buik te trekken en de huidplak langzaam ontlag te rollen.

Oefen met uw vrije hand lichte druk uit op de huid om het verwijderen te vergemakkelijken.

Weggooiën afval

Het product is ontworpen speciaal voor eenmalig gebruik en moet volgens de plaatselijke richtlijnen worden afgevoerd, bijvoorbeeld met het normale huishoudelijke afval.

Speel het product niet door het buik.

Omgaan met terugkerende problemen

- De huidplak plak niet goed aan de huid**

Volg de gebruiksaanwijzingen in deze bijlatten nauwkeurig op en zorg dat uw huid volledig droog en schoon is voordat u de huidplak aanbrengt. Het is belangrijk dat er volledig contact is tussen de huidplak en de huid. Oefen zachte druk uit op de huidplak bij het aanbrengen om voor een goede hechting te zorgen.
- De huid is rood en/of geïrriteerd onder de huidplak**

Geïrriteerde huid kan veel oorzaken hebben. Het kan worden veroorzaakt door het gebruik van een huidplak dat niet bij uw lichaamsprofiel past of bijvoorbeeld het te groot is. Het kan ook het gevolg zijn van onvoldoende reiniging van de huid of te snel verwijderen van de huidplak. Bespreek het probleem zo snel mogelijk met uw stomaverpleegkundige.
- Lekkage onder de huidplak**

Lekkage kan meerdere oorzaken hebben. Het kan het gevolg zijn van een verandering in de vorm van het lichaam en/of de vorm, of het optuigen aanbrengen van de huidplak. Om te zien of uw lichaamsprofiel is veranderd kunt u de online zelftesttoetsingstest doen op www.coloplast-fibrocyltek.nl. Wanneer de vorm van uw lichaam is veranderd is mogelijk ander opvangmateriaal of een onderlaarsproduct wenselijk. Bespreek lekage zo snel mogelijk met uw stomaverpleegkundige.

Verklaring van de symbolen

MID	Medisch hulpmiddel		Niet opnieuw gebruiken
CE	Geef aan dat het product in overeenstemming is met de Europese normen voor medische hulpmiddelen	UDI	Unieke productidentificatie (Global Trade Item Number)
REF	Referentienummer	GTIN	Wereldwijd handelsartikelnummer
	Vervaldatum (DD-MJJ-YY)		Niet blootstellen aan zonlicht
LOT	Lotnummer		Draag kant boven
	Fabricagedatum (DD-MJJ-YY)		Recyclebare verpakking
	Fabrikant	MR	MR-veilig
	Gebruiksaanwijzing raadplegen		

CE
Coloplast
2020-12-19

Gebruiksaanwijzing
Zie de gebruiksaanwijzing op www.coloplast-fibrocyltek.nl

Gebruiksaanwijzing
Het Coloplast-Sgo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden © 2020-12-19



Gebruiksaanwijzing

SenSura[®] Mio Convex Flip

Convex Flip stomazakje
1-delig gesloten zakje

