

BLADDER MANAGEMENT

Liquick X-treme en Liquick X-treme Plus

Vooraf geactiveerde, gebruiksklare intermitterende katheters




Teleflex

Liquick X-treme katheter

Geniet van uw onafhankelijkheid – snel en eenvoudig

Bij Teleflex begrijpen we hoe belangrijk het is om mensen te helpen hun leven zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken, terwijl ze hun onafhankelijkheid en waardigheid behouden. Met dit in gedachten hebben we een intermitterende katheter ontwikkeld: de Liquick X-treme katheter is een gebruiksklare katheter voor intermitterende katheterisatie die intuïtief is en eenvoudig kan worden toegepast waar u hem maar nodig hebt – voor extreme onafhankelijkheid en comfort.

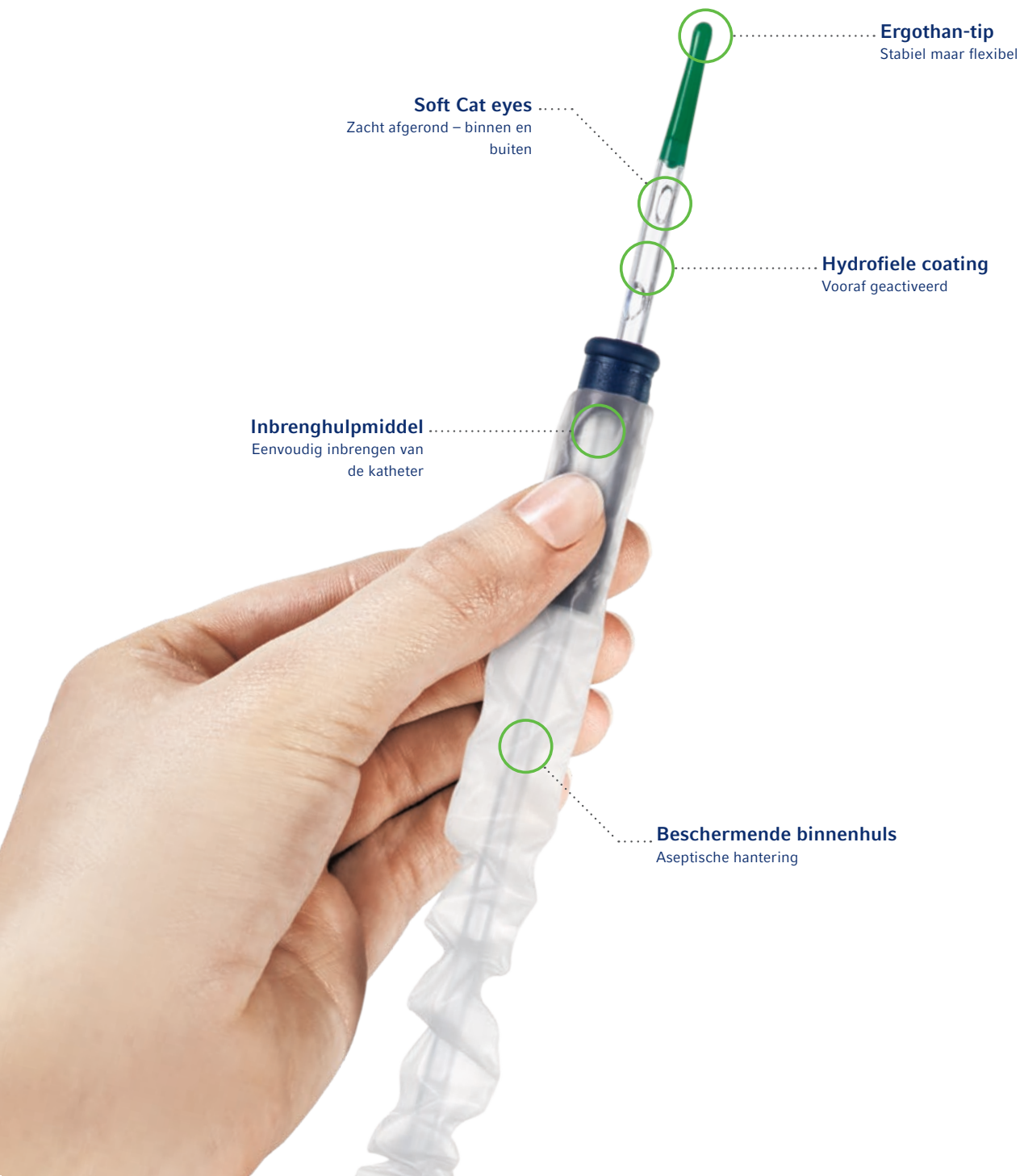

X-Treme snelheid

Gebruiksklaar

De Liquick X-treme katheter is klaar voor gebruik rechtstreeks uit de verpakking. U hoeft geen zakje kapot te maken, glijmiddel toe te voegen of te wachten tot de hydrofiele coating geactiveerd is. Dankzij de voorgeactiveerde hydrofiele coating op de SafetyCat-katheter, is het gebruik van de Liquick X-treme katheter snel en eenvoudig.

X-Treme comfort

Eenvoudige hantering zonder aanraking

De moderne verpakking in een elegant ontwerp is gemakkelijk te openen. De Liquick X-treme katheter is uitgerust met een blauw inbrenghulpmiddel en steriele beschermende binnenhuls, die het volledige oppervlak van de katheter bedekt. Dit maakt een comfortabele en volledig non-touch katheterisatie mogelijk: het enige wat u hoeft te doen is de verpakking openen, uit de verpakking halen en inbrengen.

X-Treme gebruiksgemak


Middelpunt van onze technologie

De Liquick X-treme katheter is uitgerust met onze SafetyCat-katheter met zacht afgeronde Soft Cat Eyes, een flexibele Ergothan-tip en ook een vooraf geactiveerde hydrofiele coating. De Liquick X-treme katheter zorgt zo voor een zachte en gladde katheterisatie.

Liquick X-treme Plus katheter

Alles in één – geschikt voor dagelijks gebruik

De nieuwe, gebruiksklare Liquick X-treme Plus katheter is een compleet systeem voor een snelle en comfortabele katheterisatie op vrijwel elke plaats en elk tijdstip. Deze katheter heeft een vooraf aangesloten urine-opvangzak die u moeiteloos kunt gebruiken wanneer u uzelf moet katheteriseren. Alle hoogwaardige kenmerken van de Liquick X-treme katheter maken dit product bovendien geschikt voor dagelijks gebruik.

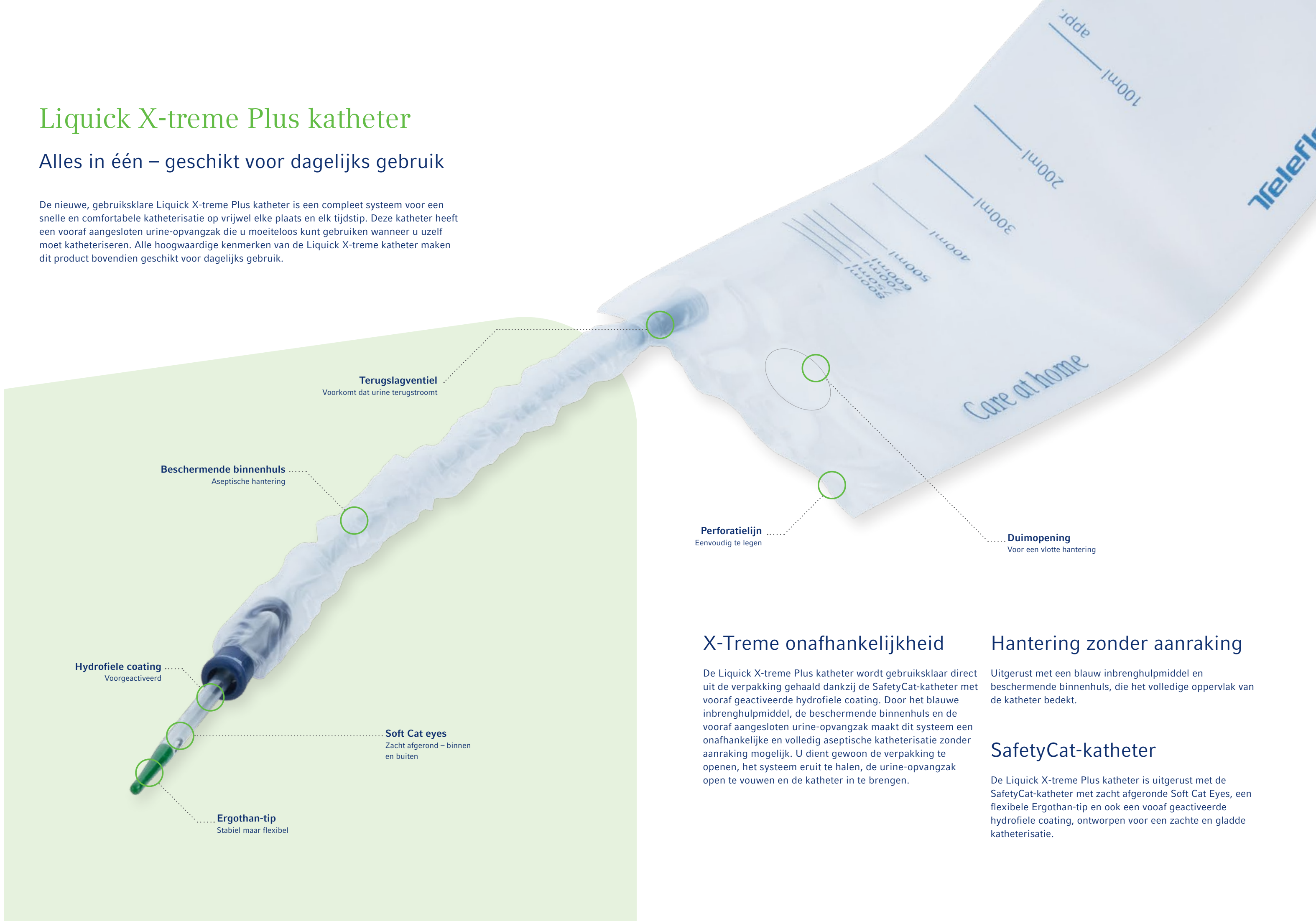

X-Treme onafhankelijkheid

De Liquick X-treme Plus katheter wordt gebruiksklaar direct uit de verpakking gehaald dankzij de SafetyCat-katheter met vooraf geactiveerde hydrofiele coating. Door het blauwe inbrenghulpmiddel, de beschermende binnenhuls en de vooraf aangesloten urine-opvangzak maakt dit systeem een onafhankelijke en volledig aseptische katheterisatie zonder aanraking mogelijk. U dient gewoon de verpakking te openen, het systeem eruit te halen, de urine-opvangzak open te vouwen en de katheter in te brengen.

Hantering zonder aanraking

Uitgerust met een blauw inbrenghulpmiddel en beschermende binnenhuls, die het volledige oppervlak van de katheter bedekt.

SafetyCat-katheter

De Liquick X-treme Plus katheter is uitgerust met de SafetyCat-katheter met zacht afgeronde Soft Cat Eyes, een flexibele Ergothan-tip en ook een vooaf geactiveerde hydrofiele coating, ontworpen voor een zachte en gladde katheterisatie.



Liquick X-treme katheter

ERGOTHAN-TIP – 2 OGEN, VERSPRINGEND			
LENGTE	CH	REF	HVH
20 cm	10 ●	851822-000100	30
	12 ○	851822-000120	
	14 ●	851822-000140	
40 cm	10 ●	851842-000100	30
	12 ○	851842-000120	
	14 ●	851842-000140	
	16 ●	851842-000160	

Liquick X-treme Plus katheter

ERGOTHAN-TIP – 2 OGEN, VERSPRINGEND			
LENGTE	CH	REF	HVH
20 cm	12 ○	852822-000120	30
	14 ●	852822-000140	
40 cm	12 ○	852842-000120	30
	14 ●	852842-000140	
	16 ●	852842-000160	

SafetyCat-katheter

Een stevige basis


Al onze katheters zijn uitgerust met de SafetyCat-katheter.

Ergothan-tip

De flexibele Ergothan-tip is ontworpen om soepel door de urethra te gaan en gemakkelijk en comfortabel in de blaas te glijden.

Soft Cat eyes

De Soft Cat eyes (afvoeropeningen) zijn zowel aan de binnen- als buitenkant van de katheter gepolijst, waardoor een zachte doorgang langs het gevoelige slijmvlies van de urethra mogelijk is.

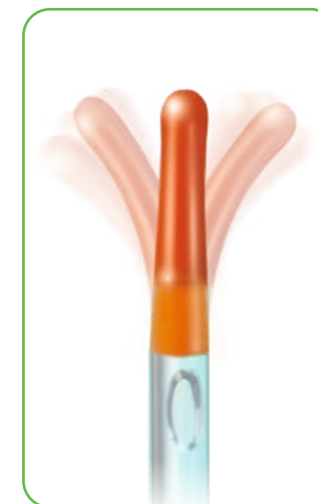

Als u dat wenst, kunt u vandaag al proefmonsters bestellen van de Liquick X-treme katheter.
Scan gewoon de QR-code om proefmonsters te bestellen via onze website
<https://www.teleflex-homecare.nl>



Teleflex Headquarters International, Ierland

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Ierland
Telefoon +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com · www.teleflex.com

Teleflex

Grosvenor House, Horseshoe Crescent, Old Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 1LJ, VK
Telefoon: +44 (0)1494 53 27 61 · Fax: +44 (0)1494 52 46 50

www.teleflex-homecare.co.uk

Teleflex, het Teleflex-logo, Liquick en Liquick X-treme zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Teleflex Incorporated of zijn dochterbedrijven, in de VS en/of andere landen. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaren. De informatie in dit materiaal is geen vervanging voor de gebruiksaanwijzing van het product. Mogelijk zijn niet alle producten verkrijgbaar in alle landen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

© 2021 Teleflex Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

MCI-2021-0033-NL · REV 0 · 03 21 PDF

Scan om onze
website te bezoeken

**Teleflex**